

Tauchrohr


Dieses Dokument beschreibt die Montage eines Tauchrohrs am HAAKE™ Viscotester™ iQ Rheometer.

Montage

The immersion tube is designed for measuring a sample in a larg(er) (original) container using the well defined CC25 DIN measuring geometry.

Das Tauchrohr ist zur Messung einer Probe in einem größeren (original) Behälter mit Messgeometrie zu verwenden.

Abbildung 1. Tauchrohr

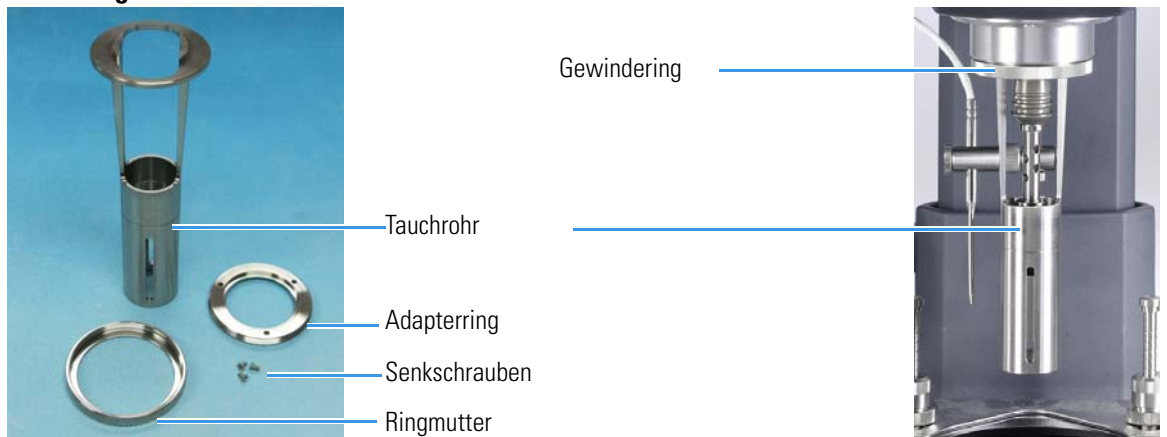

❖ Montage des Tauchrohres

1. Montieren Sie den Adapterring auf den Flansch an der Unterseite des Gerätekopfes mit den 3 Senkschrauben.
2. Befestigen Sie das Tauchrohr mit dem Adapterring.
3. Befestigen Sie das Tauchrohr auf dem Gerätekopf durch Einschrauben der Ringmutter mit dem Adapterring.

❖ Demontage des Tauchrohres

1. Lösen Sie die Ringmutter vom Adapterring.
2. Entfernen Sie das Tauchrohr vom Gerätekopf.
3. Der Adapterring braucht nicht entfernt werden.